abcam

Product datasheet

HRP Anti-Cytokeratin 10 antibody [EP1607IHCY] ab194232

ועלשעבע RabMAb

画像数3

製品の概要

製品名 HRP Anti-Cytokeratin 10 antibody [EP1607IHCY]

製品の詳細 HRP Rabbit monoclonal [EP1607IHCY] to Cytokeratin 10

由来種 Rabbit 標識 HRP

アプリケーション 適用あり: IHC-P, WB

種交差性 交差種: Human

交差が予測される動物種: Mouse, Rat 4

免疫原 Synthetic peptide. This information is proprietary to Abcam and/or its suppliers.

ポジティブ・コントロール WB: HaCat whole cell lysate. IHC-P: Normal human skin tissue.

Our RabMAb® technology is a patented hybridoma-based technology for making rabbit 特記事項

monoclonal antibodies. For details on our patents, please refer to **RabMAb® patents**.

製品の特性

製品の状態 Liquid

保存方法 Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C.

Avoid freeze / thaw cycle. Store In the Dark.

バッファー pH: 7.40

Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution

Constituents: 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, PBS

精製度 Protein A purified

ポリ/モノ モノクローナル クローン名 EP1607IHCY

アイソタイプ ΙgG

アプリケーション

Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab194232の使用に適用されます The Abpromise guarantee

アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/100. Perform heat mediated antigen retrieval before commencing with IHC staining protocol.
WB		1/5000. Detects a band of approximately 60 kDa (predicted molecular weight: 60 kDa).

ターゲット情報

組織特異性関連疾患

Seen in all suprabasal cell layers including stratum corneum.


Defects in KRT10 are a cause of bullous congenital ichthyosiform erythroderma (BCIE) [MIM:113800]; also known as epidermolytic hyperkeratosis (EHK) or bullous erythroderma ichthyosiformis congenita of Brocq. BCIE is an autosomal dominant skin disorder characterized by widespread blistering and an ichthyotic erythroderma at birth that persist into adulthood. Histologically there is a diffuse epidermolytic degeneration in the lower spinous layer of the epidermis. Within a few weeks from birth, erythroderma and blister formation diminish and hyperkeratoses develop.

Defects in KRT10 are a cause of ichthyosis annular epidermolytic (AEI) [MIM:607602]; also known as cyclic ichthyosis with epidermolytic hyperkeratosis. AEI is a skin disorder resembling bullous congenital ichthyosiform erythroderma. Affected individuals present with bullous ichthyosis in early childhood and hyperkeratotic lichenified plaques in the flexural areas and extensor surfaces at later ages. The feature that distinguishes AEI from BCIE is dramatic episodes of flares of annular polycyclic plaques with scale, which coalesce to involve most of the body surface and can persist for several weeks or even months.

配列類似性

Belongs to the intermediate filament family.

画像

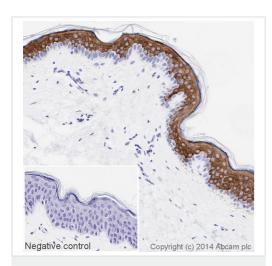


Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffinembedded sections) - HRP Anti-Cytokeratin 10 antibody [EP1607IHCY] (ab194232)

IHC image of Cytokeratin 10 staining in a section of formalin-fixed paraffin-embedded normal human skin*, performed on a Leica BOND. The section was pre-treated using heat mediated antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH6, epitope retrieval solution 1) for 20mins. The section was then incubated with ab194232 at 1/100 dilution, for 15 mins at room temperature. DAB was used as the chromogen. The section was then counterstained with haematoxylin and mounted with DPX. The inset negative control image is taken from an identical assay without primary antibody.

For other IHC staining systems (automated and non-automated) customers should optimize variable parameters such as antigen retrieval conditions, primary antibody concentration and antibody incubation times.

*Tissue obtained from the Human Research Tissue Bank,

supported by the NIHR Cambridge Biomedical Research Centre

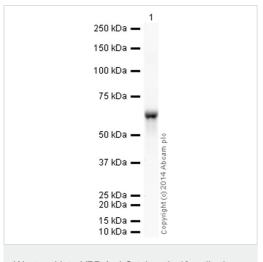

Western blot - HRP Anti-Cytokeratin 10 antibody [EP1607IHCY] (ab194232) HRP Anti-Cytokeratin 10 antibody [EP1607lHCY] (ab194232) at 1/5000 dilution + HaCat whole cell lysate at 10 μg


Developed using the ECL technique.

Performed under reducing conditions.

Predicted band size: 60 kDa **Observed band size:** 60 kDa

Exposure time: 2 minutes

This blot was produced using a 4-12% Bis-tris gel under the MOPS buffer system. The gel was run at 200V for 50 minutes before being transferred onto a Nitrocellulose membrane at 30V for 70 minutes. The membrane was then blocked for an hour using 3% milk before being incubated with ab194232 overnight at 4°C. Antibody binding was visualised using ECL development solution **ab133406**.

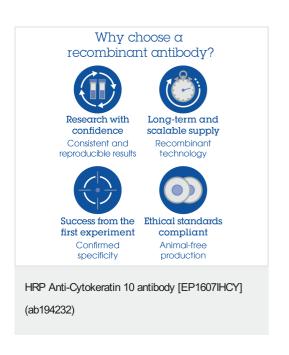

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery

- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit https://www.abcam.co.jp/abpromise or contact our technical team.

Terms and conditions

• Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors