

### 10x EDTA Buffer pH 8.0 ab64216

**2 References**   [画像数 1](#)

#### 製品の概要

製品名	10x EDTA Buffer pH 8.0
アプリケーション	<b>適用あり:</b> IHC-P
特記事項	EDTA buffer pH 8.0 for heat-induced antigen retrieval (HIER) during IHC (ab64216).  <b>Recommended Procedure: Microwave</b>  Deparaffinize and rehydrate tissue sections. Dilute the product 1:10 with deionized water. Immerse sections in coplin jar filled with target retrieval solution microwave on HIGH power until boiling. Keep the slides warm by heating for 10min at LOW power. Let coplin jar sit in microwave for at least 20min. Remove and rinse with buffer. Proceed with staining.

#### 製品の特性


製品の状態	Liquid
保存方法	Store at +4°C.
バッファー	pH: 7.7 Constituent: 0.29% EDTA  Buffer 10x concentrated.
関連性	EDTA buffer is used on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections mounted on glass slides for target retrieval prior to immunohistochemistry (IHC) procedures. Target retrieval prior to IHC procedures obtains positive results, or results in an increase in staining intensity with many primary antibodies.

#### アプリケーション

**The Abpromise guarantee**   **Abpromise保証は、** 次のテスト済みアプリケーションにおけるab64216の使用に適用されます  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		Use at an assay dependent dilution.

## 画像

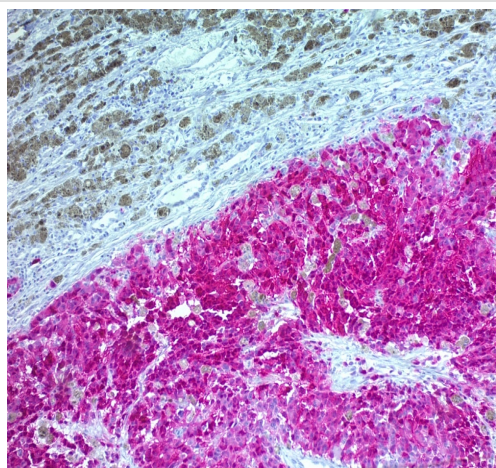

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - 10x EDTA Buffer pH 8.0  
(ab64216)

ab64216 Human Melanoma stained with an anti-S-100 antibody diluted with Antibody Diluent ([ab64211](#))

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors